

Mit leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. Eingebanntes und daher sehr lange haltbares Druckbild. Ausguss für sauberes Arbeiten. Aufgrund der Wandstärkenverteilung ideal zur Verwendung als Kochglas.

With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.

DURAN® BECHER
niedrige Form, mit Ausguss

DURAN® BEAKER
low form, with spout

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
21 106 07 ¹	5 ³	22	30	10
21 106 08 ¹	10 ³	26	35	10
21 106 14	25 ³	34	50	10
21 106 17	50	42	60	10
21 106 24	100	50	70	10
21 106 29	150	60	80	10
21 106 36	250	70	95	10
21 106 41	400	80	110	10
21 106 48	600	90	125	10
21 106 53	800	100	135	10
21 106 54	1 000	105	145	10
21 106 63	2 000	132	185	10
21 106 68	3 000	152	210	4
21 106 73	5 000	170	270	1
21 106 86 ^{1,2}	10 000	217	350	1

¹ Ohne Teilung.

² Nicht nach DIN und ISO.

³ Ohne Retrace Code.

¹ Without graduation.

² Non-DIN/ISO size.


³ Without Retrace Code.

Bessere mechanische Stabilität, durch erhöhten Glaseinsatz. Verstärkter Rand erhöht Stoßfestigkeit und reduziert Bruchgefahr.

Better mechanical stability due to increased glass content. Reinforced rim increases shock resistance and reduces risk of breakage.

Beispielhafte Anwendung: Arbeiten unter mechanischer Beanspruchung.

Typical applications: Working under mechanical load.

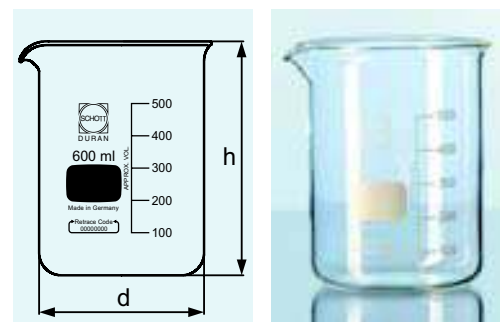

DURAN® SUPER DUTY BECHER
niedrige Form mit Ausguss

DURAN® SUPER DUTY BEAKER
low form with spout


Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
21 107 29 09	150	60	80	10
21 107 36 05	250	70	95	10
21 107 41 04	400	80	110	10
21 107 48 07	600	90	125	10
21 107 54 09	1 000	105	145	10
21 107 63 02	2 000	132	185	10
21 107 73 07	5 000	170	270	1

Hinweis

Es wird ein gleichmäßiges und langsames Erwärmen empfohlen. Bei sehr hohen Temperaturen bzw. schnellen Temperaturwechseln sollten die Standard DURAN® Becher verwendet werden.

Note

Uniform and slow heating is recommended. The standard DURAN® beakers should be used when working at very high temperatures or if rapid temperature changes are expected.

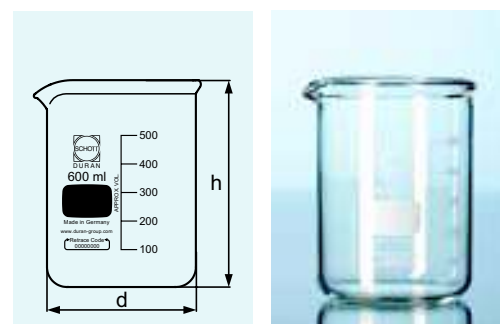

NEU
NEW